

TECHNISCHE DATEN

- Spannung: 220 V
- Frequenz: 50–60 Hz
- Ausgangsfrequenz: 65 W
- Anzahl der Farben: 7
- Lichtstärke: 1–5
- Timer: 0 bis 60 Minuten, in 5 Minuten Stufen
- Material: Kunststoff

PACKUNGSINHALT

- Lichtpaneel
- integrierte Steuerung
- Adapter und Netzkabel
- Schutzbrille

WARNUNG

- Tragen Sie während der Photonenbehandlung eine Schutzbrille.
- Bedecken Sie Ihre Augen, wenn Sie keine Schutzbrille tragen
Mit einem feuchten Baumwollstück.
- Vermeiden Sie bei der Behandlung Hautbereiche mit Wunden.
- Die Haut kann nach der ersten Anwendung mit Rötung,
Trockenheit usw. reagieren
. Dies sind normale Reaktionen, die allmählich verschwinden.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebes nicht ab.

NICHT GEEIGNET FÜR:

- schwangere Frauen.
- Personen, die an Epilepsie leiden
- Personen mit Herzerkrankungen – Herzrhythmusstörungen
- Personen mit Infektionskrankheiten
- Personen mit Metallteilen im Körper
- Personen die gegen Licht allergisch sind
- Personen, die sich einer Operation unterzogen haben
- Personen die an Diabetes- oder Krebserkrankung leiden

Omega Light LED

OB-LED 03




Photonen-LED-Therapie
Für zu Hause und den professionellen Einsatz

BEHANDLUNG MIT PHOTONENTHERAPIE MIT HILFE VON LED-LICHT

Sichtbares Licht ist elektromagnetische Strahlung, die verschiedene Wellenlängen im Bereich von 380–740 nm erreicht. Unsere Zellen sind Photorezeptiv – nehmen Licht wahr und reagieren unterschiedlich auf verschiedene Lichtfarben.

Bei der Photonentherapie dringt das Licht wie ein Energiefluss in Form von Photonen durch den Körper. Die verschiedenen Wellenlängen des Lichts ergeben unterschiedliche Hautpflege-Effekte – stimulieren die natürliche Heilkraft der Zellen.

Die Photonentherapie ist sicher, gefahrlos und hat viel Popularität in der Dermatologie gewonnen.

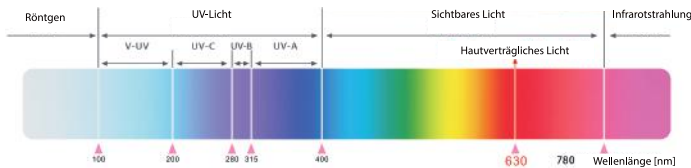

BEDEUTUNG DER EINZELNEN LICHTER

Rotes Licht – 630 nm, unterstützt den Stoffwechsel, beschleunigt die Durchblutung im Unterhautgewebe, verbessert die Hautfeuchtigkeit, erhöht das Kollagenprotein der Haut, verbessert die Elastizität und glättet feine Linien, beruhigt die Haut.

Gelbes Licht – 590 nm, verbessert den Zellenstoffwechsel, verbessert die entgiftenden Eigenschaften durch die Förderung der lymphatischen Aktivität, verlangsamt die Hautalterung. Fördert die Aufnahme von Kosmetika.

Grünes Licht – 520 nm, reduziert effektiv die Produktion von Melanin, beseitigt epidermale Pigmentflecken, reguliert die Haut- und Talgdrüsen Funktion. Geeignet für alle Hauttypen.

Blaues Licht – 470 nm, beseitigt schädliche Bakterien, antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung, und Akneprävention.

FUNKTION DER OMEGA LIGHT LED PDT THERAPIE

- 7 Farben insgesamt; 4 farbige LED-Leuchten (rotes, gelbes, grünes, blaues Licht) und deren Kombination
- Kombinierte LED-Therapie
- Lüfter
- Timer 0–60 Minuten

KOMBINATION VON LICHTERN

Lila Licht – 690 nm, vereint die Auswirkungen von rotem und blauem Licht, insbesondere geeignet zur Behandlung von Akne und Aknenarben.

Hellblaues Licht – 490 nm, erhöht die Zellenergie, beschleunigt effektiv den Stoffwechsel.

Laserlicht – 510 nm, dringt tief in die Hautschichten ein, erhöht die Aktivität des Gewebestoffwechsels, zersetzt Flecken und verbessert feine Falten und schlaffe Haut.